



VIND DE
PERFECTE MAAT

Gids voor het opmeten en
kiezen van de juiste maat van
uw Neoflex producten.



Neo 00 Multifunctioneel

- Neo 00.01 Multifunctionele band
- Neo 00.02 Multifunctionele band extensie

Neo 20

- Neo 20.01 Borststeun – breed
- Neo 20.02 Borststeun met rits – breed
- Neo 20.03 Borststeun – slank
- Neo 20.04 Borststeun met rits – slank
- Neo 20.05 Schouderharnas
- Neo 20.06 Gekoppeld schouderharnas
- Neo 20.07 Borstriem

Neo 30

- Neo 30.01 2 punten heupgordel
- Neo 30.02 4 punten heupgordel
- Neo 30.03 Zitbroek

Neo 40

- Neo 40.01 Kuitband
- Neo 40.02 Enkelcontrole



HOE TE METEN?

Neo 00.01 Multifunctionele band

Neo 00.02 Multifunctionele band extensie

Meet de totale omtrek van de borst + rugleuning, tel er 15-20 cm bij en geef deze afmeting door in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.



A	Maat
<80 cm	S
80-120 cm	M
121-140 cm	L
141-160 cm	XL

HOE TE METEN?

Neo 20.01 Borststeun – breed

Neo 20.02 Borststeun met rits – breed

Neo 20.03 Borststeun – slank

Neo 20.04 Borststeun met rits – slank



Meet de borstbreedte onder de armen en geef deze afmeting door in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.



B	Maat
>24 cm	XS
25-26 cm	S
27-32 cm	M
33-39 cm	L
40-46 cm	XL

HOE TE METEN?

Neo 20.05 Schouderharnas

Neo 20.06 Gekoppeld schouderharnas



Meet de totale lengte van de bovenkant van de schouder tot aan de elleboogbasis en geef deze afmeting door in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.



A	Maat
25-30 cm	S
31-37 cm	M
38-40 cm	L
41-45 cm	XL

HOE TE METEN?

Neo 30.01 2 punten heupgordel

Neo 30.02 4 punten heupgordel

Meet de breedte van het bekken en geef deze afmeting door in in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.




A	Maat
25-33 cm	XS
31-40 cm	S
39-52 cm	M
48-65 cm	L

HOE TE METEN?

Neo 30.03 Zitbroek

Meet de afstand van het zitvlak tot het buitenste deel van de dij zoals aangegeven op de foto en geef deze afmeting door in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.

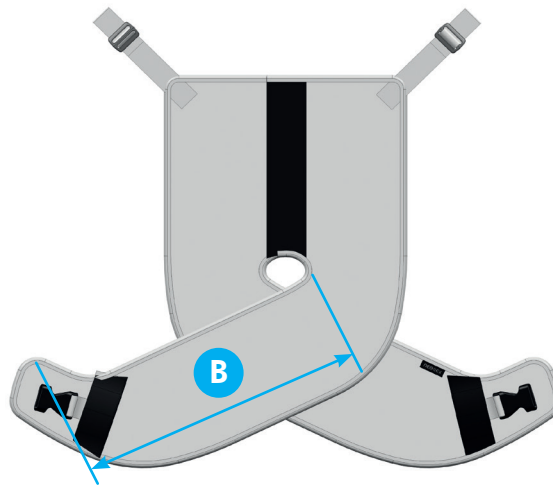

B	Maat
17-24 cm	XS
24-26 cm	S
27-32 cm	M
33-38 cm	L

HOE TE METEN?

Neo 40.01 Kuitband

Meet de afstand tussen de hoofdbuizen van de voetsteun en geef deze afmeting door in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.



A	Maat
18-24 cm	S
25-32 cm	M
33-40 cm	L
40-50 cm	XL

HOE TE METEN?

Neo 40.02 Enkelcontrole voor beide voeten

Meet de enkelomtrek en geef deze afmeting door in de tabel hieronder om de juiste maat te vinden.



	Maat
14-17	XS
17-20	S
19-23	M
22-29	L
28-33	XL

