

Cane Zoe


1. Hold the handle with one hand while you use your other hand to press the two snapping buttons.

2. Slide the extension up or down until the two snap buttons protrude through an adjustment hole on the tube.

NOTE: An audible "CLICK" sound will be heard when the snap button securely protrudes through the adjustment hole.

3. Repeat the above step until the cane is at the desired height.

 Users weight: 130 kg

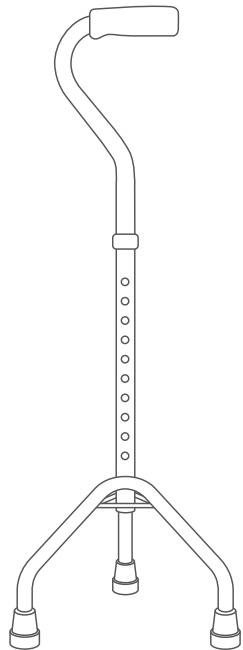

Subject to technical alterations.

VERMEIREN

Opening up new horizons in mobility

www.vermeiren.com




Driepikkel Zoe


1. Hou de driepikkel aan het uiteinde met één hand stevig vast en gebruik de andere hand om de twee drukknoppen gelijktijdig in te drukken.

2. Schuif het bovenste gedeelte omhoog of omlaag tot de drukknoppen in de volgende opening klikken.

NOTA: Een hoorbare "KLIK" geeft aan dat de drukknoppen zich veilig in de juiste positie bevinden.

3. Herhaal bovenvermelde stappen tot de gewenste hoogte is bereikt.

 Gebruikersgewicht: 130 kg

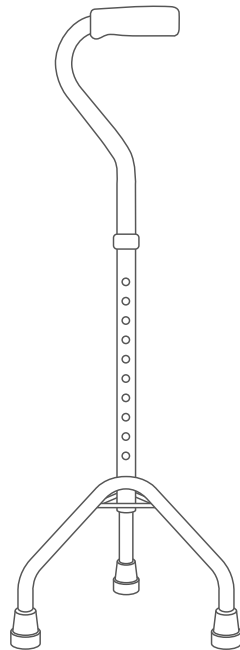

Voorbehouden technische wijzigingen.

VERMEIREN

Grensverleggend in mobiliteit

www.vermeiren.com



Cane Zoe


1. Tenez d'une main la poignée de la cane et pressez le bouton ressort de l'autre main.

2. Faites glisser la partie supérieure vers le haut ou le bas jusqu'au trou correspond au réglage désiré.

NB: Un "CLICK" est clairement audible lorsque le bouton ressort est correctement enclenché.

3. Répétez l'opération jusqu'au réglage parfait.

 Poids maxi utilisateur : 130 kg

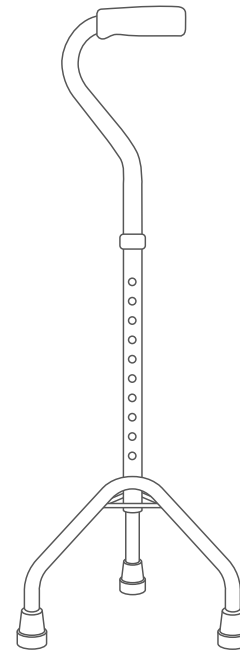

Sous réserve de modifications techniques.

VERMEIREN

Pour plus de mobilité

www.vermeiren.com




Gehhilfe Zoe


1. Halten Sie den Handgriff mit der einer Hand, während Sie mit der andere Hand die zwei Arretierungsknöpfe drücken.

2. Bewegen Sie das Handgriffrohr nach oben oder unten bis die zwei Arretierungsknöpfe wieder in den Lochungen des Hauptrohrs einrasten.

HINWEIS: Ein deutlich vernehmbares "CLICK" ist zu hören, wenn die Arretierungsknöpfe sicher eingerastet sind.

3. Wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte, bis die Gehhilfe die gewünschte Höheneinstellung erreicht hat.

 Max. Benutzergewicht: 130 kg

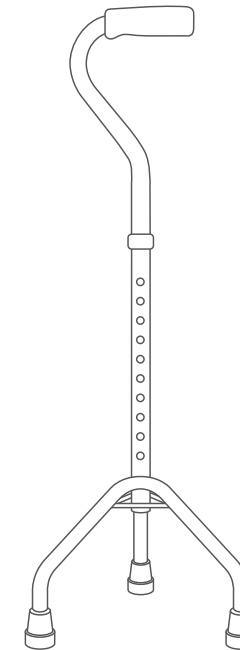

Technische Änderungen vorbehalten.

VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

www.vermeiren.com



Tripode Zoe


1. Tenete l'impugnatura con una mano mentre con l'altra mano premete i due pulsanti..

2. Fate scorrere il tubo di regolazione in altezza sino a quando i due pulsanti fuoriescono dai fori posizionati sul tubo.

NOTA: potrete sentire un "click" acustico quando i due pulsanti fuoriescono correttamente dai due fori.

3. Ripetete i suddetti passaggi sino a raggiungere l'altezza desiderata.

! Peso massimo dell'utilizzatore:
130 kg.

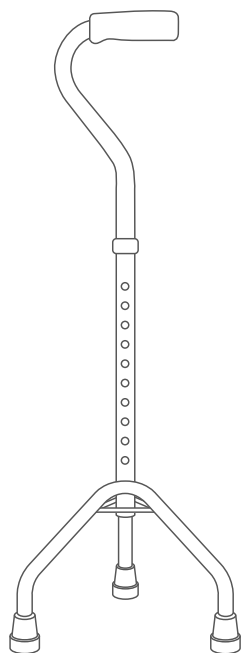

Modifiche tecniche riservate.

VERMEIREN
Mobilità illimitata

www.vermeiren.com



Bastón Zoe


1. Sujete la empuñadura con una mano mientras utiliza la otra para pulsar los dos botones de presión.

2. Deslice la parte extensible hacia arriba o hacia abajo hasta que los dos botones de presión queden ajustados en los orificios del tubo.

NOTA: Oirá un "CLIC" cuando los botones de presión queden fijos en los orificios de ajuste.

3. Repita el paso anterior hasta que el bastón esté a la altura deseada.

! Peso soportado: 130 kg

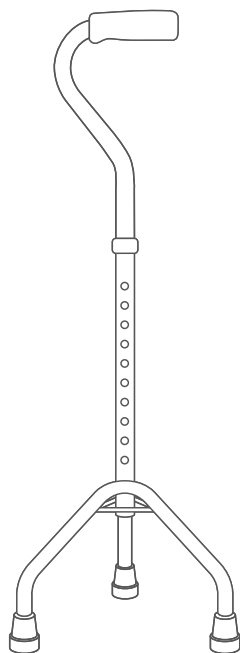

Abriendo nuevos horizontes en movilidad.

VERMEIREN
Para más movilidad

www.vermeiren.com




Trójnóg Zoe

1. Aby wyregulować długość należy jedną ręką trzymać uchwyt laski a palcami drugiej ręką wcisnąć dwa przyciski do regulacji.

2. Następnie wysunąć lub wsunąć część z uchwytem do podstawy, ustawić na żądanej długości w taki sposób aby przyciski regulacji wysunęły się przez odpowiedni otwór regulacyjny w podstawie.

Uwaga! Kiedy przyciski wysuną się w sposób zapewniający bezpieczne używanie powinniśmy usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.

3. Aby zmienić długość laski należy powtórzyć dwa pierwsze kroki.

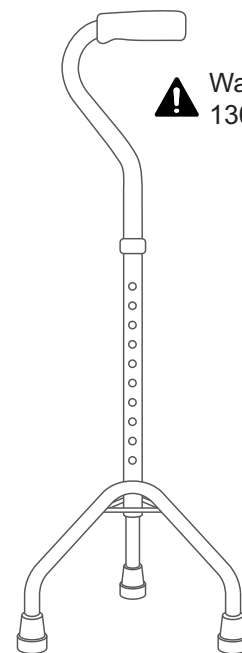

! Waga użytkownika:
130 kg



Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów.

VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości

www.vermeiren.com



Hůl Zoe


1. Jednou rukou držte rukojeť, zatímco druhou rukou stisknete obě tlačítka současně.

2. Posouvejte horní část nahoru nebo dolů, dokud tlačítka nezapadnou do dalšího otvoru.

POZNÁMKA: Slyšitelné "CVAK" signalizuje, že jsou tlačítka bezpečně na svém místě.

3. Opakujte výše uvedený krok, dokud nebude hůl v požadované výšce.

! Hmotnost uživatele: 130 kg

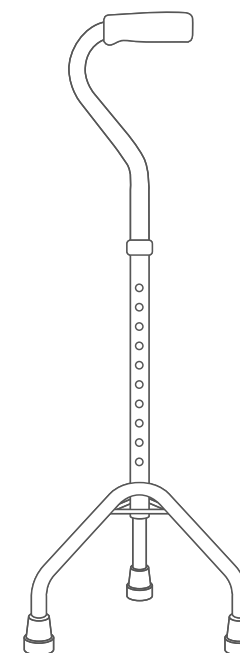

Technické změny vyhrazeny

VERMEIREN
Posouváme hranice mobility

www.vermeiren.com

