



Versto

Lichtgewicht aanpasbare
elektrische rolstoel

VERMEIREN
we care for you

Verso

Lichtgewicht aanpasbare elektrische rolstoel

De Verso is een veelzijdige en wendbare elektrische rolstoel. Dankzij het lichtgewicht ontwerp is het de perfecte rolstoel voor gebruikers die veel onderweg zijn en hun mobiliteit willen vergroten zonder aan comfort in te boeten. Dankzij onze uitgebreide keuze in opties biedt de Verso zijn gebruiker een opmerkelijk aanpassingsvermogen. De Verso is gemaakt door de duurzaamheid van een manueel rolstoelframe samen te voegen met de geavanceerde functies van twee gemotoriseerde achterwielen en is daarmee een perfecte keuze voor een comfortabele, lichtgewicht elektrische rolstoel. De lithiumbatterij kan worden verwijderd om eenvoudig te worden opgeladen voor meer gebruiksgemak.

VERMEIREN
we care for you







STANDAARDPAKKET



MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Eenvoudig, maar perfect. Verso heeft het allemaal. Demonteer je rolstoel in een paar seconden. Alle onderdelen zijn gemakkelijk mee te nemen en niet te zwaar om gemakkelijk in een auto te vervoeren.

Montage is eenvoudig met ons Click&Drive systeem. Geen gereedschap nodig, gewoon je accu aansluiten en je kunt rijden! Dankzij onze verwijderbare accu kun je je stoel opladen waar en wanneer je maar wilt.



Verso is compatibel met vliegreizen!

Schakel gewoon de batterij uit en neem je rolstoel mee.
Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding voor transportinstructies.

MAKKELIJK MEE TE NEMEN

Een unieke functie voor de Verso is het afneembare motor- en accublok. Je kunt je rolstoel loskoppelen van de accu en het wielblok om hem gemakkelijk op te bergen en te vervoeren. Zowel het frame als het "aangedreven deel" van de Verso hebben een extra wiel om ervoor te zorgen dat er geen onderdelen beschadigd kunnen raken door het loskoppelen. Ze zorgen ook voor eenvoudig manoeuvreren. De zitting kan eenvoudig worden ingeklapt, net als bij een van onze andere veelverkochte manuele rolstoelen. Perfect voor vervoer in de cabine van de auto of om thuis op te bergen.



LICHTGEWICHT



16,2 kg

Zwaarste deel



9,9 kg

Transportgewicht
(zonder kussen, voetsteun en armsteun)

Wij geven om jou... en je rug. De Verso is een zeer lichte elektrische rolstoel met slechts 16,2 kg voor het gemotoriseerde deel en 9,9 kg transportgewicht voor het hoofdframe. Gemakkelijk op te tillen zonder enige belasting.





RIJERVARING



Controller

De P&G controller is precies zoals we het graag zien bij **VERMEIREN**, no-nonsense. Met een batterijstatusindicator, snelheidsadapter en een comfortabele joystick is deze controller eenvoudig te gebruiken. Basisprogrammering is ook mogelijk om je rijervaring te personaliseren.

De controller is gemakkelijk afneembaar wanneer je de **Verso** demonteert.



Tot 21 km

Ervaar een groter rijbereik met de 17,5 Ah batterij. Kies de accu die past bij jouw verlangen naar een ontsnapping.



6 km/u

Met 6 km/u rijdt de Verso met de perfecte snelheid voor comfortabele gesprekken en wandelingen met je vrienden en familie.



ACCU - MOTOREN

De Lithium Li-ion accu (verkrijgbaar in 12,8 Ah of 17,5 Ah) heeft een accustatusindicator en is licht van gewicht. Ontgrendel je accu eenvoudig met je eigen anti-diefstalsleutel om je accu op te laden waar je maar wilt. Geen tijd om op te laden? Een extra accu is optioneel verkrijgbaar.

De accu zit handig aan de achterkant van je rolstoel, zodat je hem er gemakkelijk uit kunt halen om op te laden of om snel de accustatus te controleren.

Met 2 x 250 W motoren en 12" PU zwarte banden kan de Verso zich meten met anderen in zijn categorie. Een geweldige en duurzame keuze voor een elektrische rolstoel voor dagelijks gebruik.

Verwijderbare
Li-ion batterij

12,8 Ah - 24 V
17,5 Ah - 24 V

2 x 250 W
motoren





CAUTION Store in cool and dry place!
Do not expose the product to fire, water or moisture



A close-up photograph of a bicycle handlebar. The handlebar is black with a blue rectangular plate in the center that has the word 'Verso' written on it in a stylized, embossed font. The background is blurred, showing other parts of the bicycle frame and a blue component.

ONTWERP & KLEUR

Met een gestroomlijnd ontwerp en leuke kleuraccenten kan de Verso worden aangepast aan jouw voorkeuren, terwijl hij er modern en aantrekkelijk uitziet. De kleuraccenten dienen een dubbel doel, want zo kun je de hendels van het aangedreven deel of je voorvorken gemakkelijk vinden. Voor extra veiligheid hebben we reflectoren meegeleverd.

KLEUREN

Kleuren zijn een persoonlijke ervaring, net als uw Verso. Kies de kleurencombinatie die het beste bij jouw stijl past.

Kies je framekleur tussen glanzend wit en glanzend zwart en speel met kleuraccenten om het helemaal jouw stijl te maken.

Beschikbaar kleuraccenten

• Verso •

glanzend lichtblauw

• Verso •

glanzend lichtgroen

• Verso •

glanzend oranje

• Verso •

glanzend wit





ZEER CONFIGUREERBAAR

Pas je de Verso aan jou aan. Verso is een uiterst configureerbare stoel die het grote en uitgebreide optieaanbod van **VERMEIREN** en onze expertise in elektrische rolstoelen combineert. Kies wat het beste bij je past!

TWEE in EEN

VERANDER DE **VERSO** IN EEN HANDBEWOGEN ROLSTOEL

KIT 24" wielen


De Verso biedt een unieke optie voor mensen die zowel een handbewogen als een elektrische rolstoel nodig hebben. Met onze 24" wielenset kun je eenvoudig wisselen tussen handmatig of aangedreven rijden.

Aansluiten en rijden maar!



OPTIES

Met een zeer groot aantal opties is de **Verso** perfect voor individuele behoeften en de behoeften van de verzorger. Configureer de stoel naar wens met onze uitgebreide selectie opties.

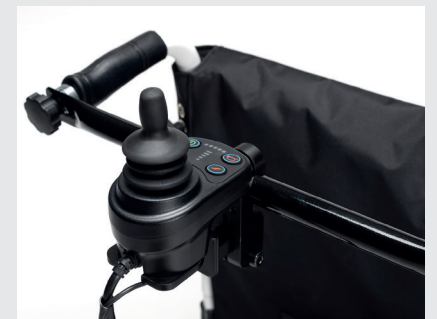

Configureer de stoel naar wens met onze uitgebreide selectie opties.



TECHNISCHE INFORMATIE

■ Totale breedte	Zitbreedte + 17cm
■ Totale lengte	1078 mm
■ Zithoogte	521 mm
■ Zitbreedte	440 - 460 - 480 - 500 mm
■ Zitdiepte	420 tot 480 mm
■ Hoogte rugleuning	400 - 420 - 440 - 460 - 480 mm

■ Batterijen	12,8 Ah - 24 V 17,5 Ah - 24 V
■ Motoren	2 x 250 W
■ Snelheid	6 km/u
■ Actieradius	15 km 21 km
■ Gewicht	31,3 kg
■ Maximum gebruikersgewicht	130 kg

Theoretische actieradius, in overeenstemming met EU-normen bij ideale omstandigheden berekend.
Snelheden en actieradius kunnen afwijken (ca. 15%).



Verso

Lichtgewicht aanpasbare
elektrische rolstoel

VERMEIREN Nederland B.V.

Correspondentieadres:
Vermeirenplein 1-15 - B-2920 Kalmthout
België

www.vermeiren.co.nl
orders@vermeiren.co.nl



V.U.: **VERMEIREN** GROUP, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 08/2024

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

VERMEIREN
we care for you